


血糖測定器 thinka BS 血液吸引時の注意


シリンジ採血の場合は、測定器への血液混入にご注意ください！



血糖測定器の**上から**シリンジで滴下しないでください。測定器の内部に血液が入り、故障の原因となります。

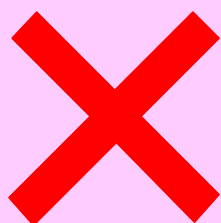

血液が測定器に入らないように
お願いします！

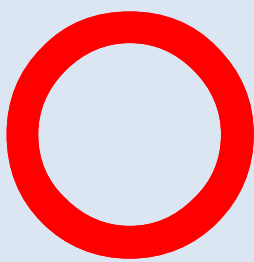

必ず、**シリンジの上から**測定器を近づけて吸引させるか、フィルムなどの上に血液を滴下してから吸引させてください。



耳等から採血する場合

ピッと音がするまで吸引してください。

ワセリンやゲンタシン軟膏を塗布されている場合は、センサーの吸引部につかないようにご注意ください。

